


Ultimate Comfort Smart



ULTIMATE COMFORT SMART

Q U A L I T É I N T E L L I G E N T E

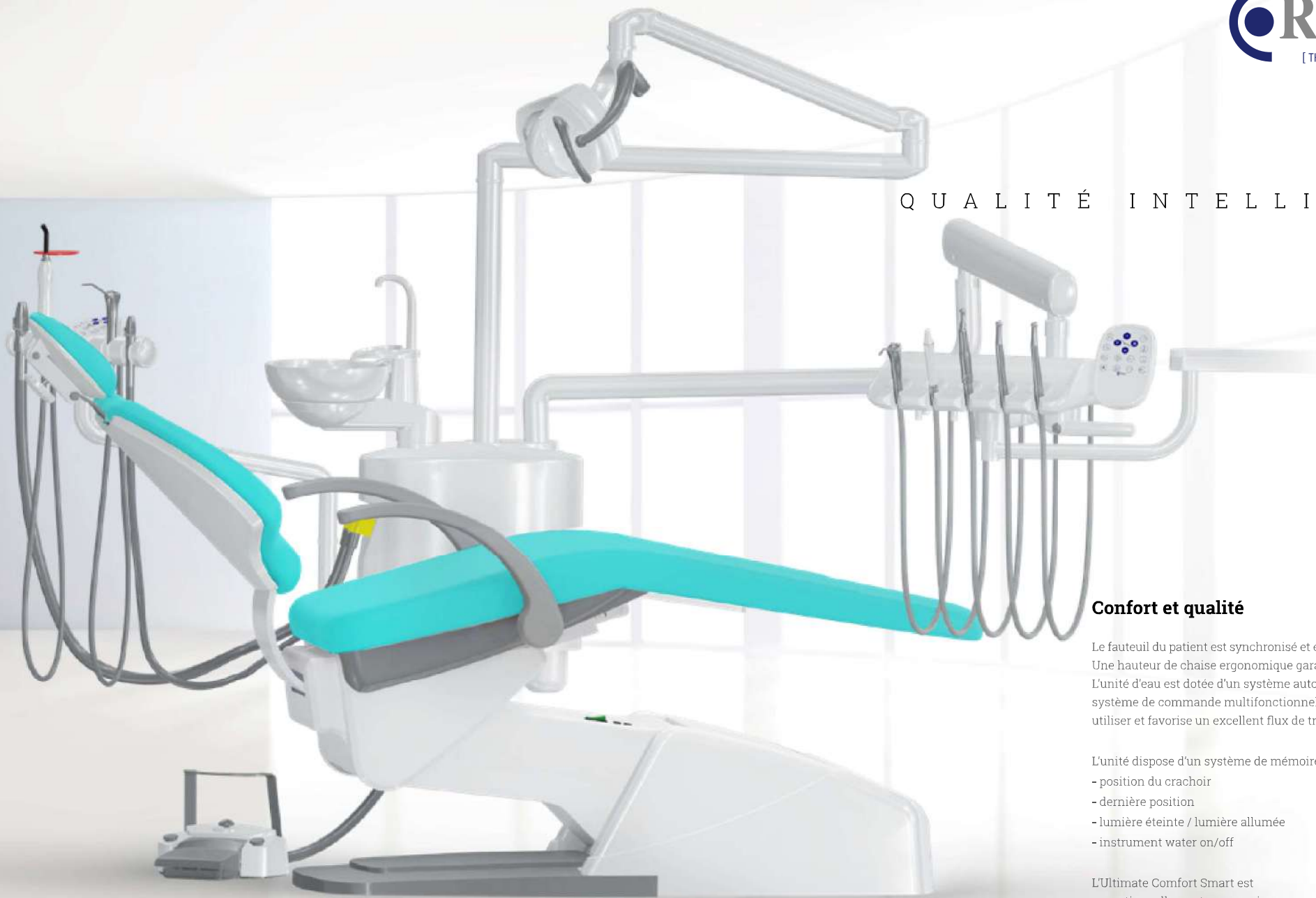

Confort et qualité

Le fauteuil du patient est synchronisé et entraîné électriquement. Une hauteur de chaise ergonomique garantit un accès facile. L'unité d'eau est dotée d'un système autonome d'eau propre. Le système de commande multifonctionnel à pédale est facile à utiliser et favorise un excellent flux de travail.

L'unité dispose d'un système de mémoire :

- position du crachoir
- dernière position
- lumière éteinte / lumière allumée
- instrument water on/off

L'Ultimate Comfort Smart est exceptionnellement ergonomique et efficace pour l'utilisation quotidienne.

C O N F O R T I N T E L L I G E N T

Chaise de patient

- Mouvement électrique de la chaise pour des déplacements rapides et silencieux
- Design ergonomique pour une assise confortable même pendant les longs traitements
- Large espace pour les jambes du dentiste
- Revêtement en cuir de haute qualité
- 4 positions de fauteuil programmables, plus la dernière position et la position de sortie
- Fonction de retour automatique :
Si l'interrupteur de sécurité est activé, le fauteuil se déplace automatiquement vers le haut sur quelques cm.
- Interrupteurs de sécurité
- Mouvement de Trendelenburg :
Mouvement de l'assise et du dossier synchronisé
- Accoudoir fixe à gauche et mobile à droite
- Appui-tête à double articulation



Éléments du dentiste

Manipulation facile et traitements efficaces : Selon les préférences personnelles, deux versions différentes sont disponibles, qui permettent un ajustement facile des instruments. Les commandes des instruments sont électriques.



„S“ Version avec des tuyaux pivotants

- Tablette disponible
- Mécanisme de freinage pneumatique du bras
- Jusqu'à 5 instruments
- 4 positions programmables du fauteuil du patient, plus la dernière position et la position de sortie
- Plateau inférieur en option

Panneau de contrôle

- Écrans tactiles avec visionneur de rayons X
- 4 positions programmables du fauteuil du patient, plus la dernière position et la position de sortie
- Tampon en silicone amovible pour un nettoyage et une désinfection faciles (version S)



„H“ Version avec tuyaux suspendus

- Tablette disponible
- Mécanisme de freinage pneumatique du bras
- Jusqu'à 5 instruments
- 4 positions programmables du fauteuil du patient, plus la dernière position et la position de sortie
- Capteurs optiques dans les porte-instruments
- Option : plateau supérieur ou inférieur



ÉCLAIRAGE INTELLIGENT



Lumière de fonctionnement

L'éclairage là où il est nécessaire : La lampe d'opération Ritter LED CoolLitet

- 3.000 - 35.000 Lux
- Effet de réduction des ombres
- Poignées amovibles et stérilisables
- Couleurs réalistes
- Température de couleur 5.000 Kelvin



Système d'aspiration Venturi

Aspiration centrale externe

Aspiration externe avec vanne de sélection du lieu.

Une machine d'aspiration est nécessaire pour le fonctionnement.




Caméra intra-orale avec moniteur

Élément assistant

Flexibilité pour une efficacité maximale

- Panneau tactile intégré
- Jusqu'à 4 instruments
- Grand et petit tuyau d'aspiration
- Seringue d'assistance
- Lumière de polymérisation

Ritter
Made in Germany

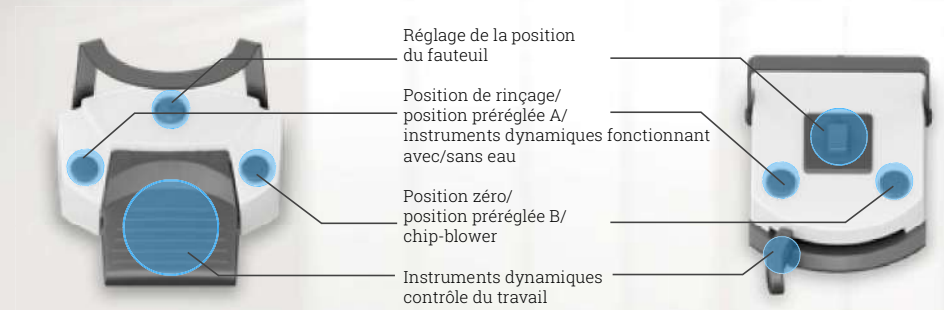

Commande au pied

Design moderne pour le mouvement des chaises et des instruments :

- Grand levier de pied pour un repositionnement facile
- Contrôle manuel des mouvements du fauteuil
- Montée/descente du dossier et du fauteuil
- Contrôle programmé des mouvements du fauteuil :
- Position du crachat/du dernier traitement
- Positions du fauteuil librement programmables
- Position d'entrée / de sortie



Type de levier en option

Contrôle des instruments :

- Commande de vitesse/puissance pour l'instrument activé
- Mode individuel de marche/arrêt de l'eau pour chaque ligne d'instruments

Boutons :

- Vaporiser de l'eau sur l'instrument
- Fonction de souffleur de copeaux



Type de pédale standard


Tabouret

- Dossier à position fixe ou à mouvement dynamique
- Sièges ergonomiques et confortables
- Dossier symétrique
- Cylindre de levage à gaz
- Pieds chromés
- Cinq roulettes doubles pour la stabilité
- Rembourrage assorti disponible en plusieurs couleurs
- Disponible avec ou sans anneau de pied



Couleurs de la tapisserie

Pour tabouret et fauteuil patient. Demandez à votre revendeur dentaire le dossier de motifs Ultimate Comfort Smart.

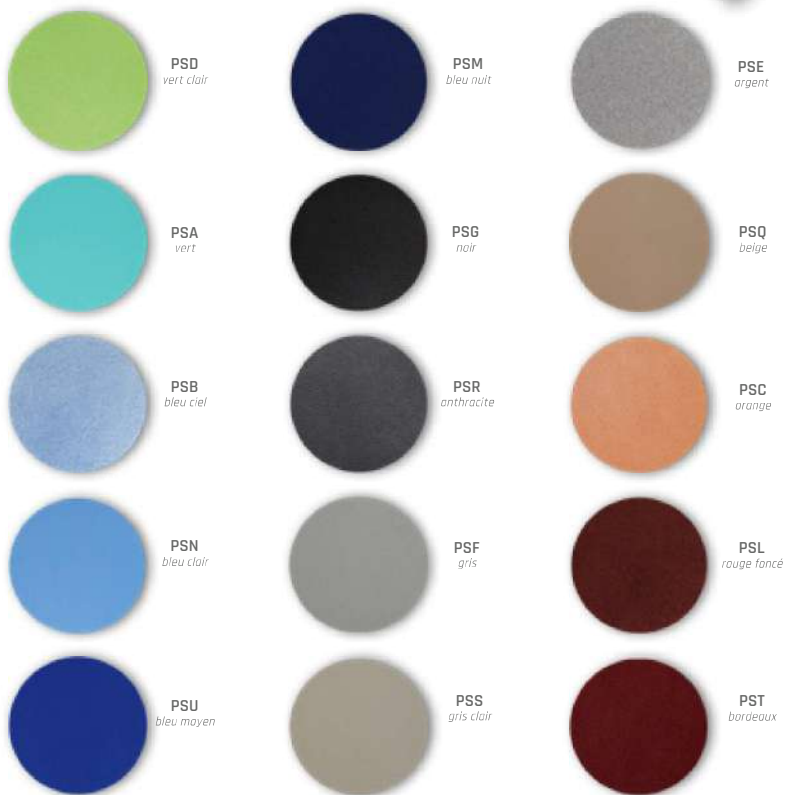

Les échantillons présentés peuvent présenter des différences de structure et de couleur en raison du processus d'impression.

Caractéristiques et options Ultimate Comfort Smart

● STANDARD ○ OPTION

Chaise de patient

- Mouvement de Trendelenburg ●
- Stockage des positions ●
- Interrupteur de sécurité ●
- Appui-tête doublement articulé mécaniquement ●
- Accoudoir fixe à gauche et mobile à droite ●
- Rembourrage sans couture ●
- Contrôle multifonctionnel ●

Élément de dentiste

- 3 Seringue fonctionnelle ●
- 3 sorties pour turbine ou moteur pneumatique sans lumière ●
- Sorties en fibre optique ○
- Moteur micro sans balai avec LED ○
- Départeur Type S ou E LED ○
- Lumière de polymérisation LED ○
- Petite visionneuse de films radiographiques ●
- Support pour 2 plateaux standard ●
- Tablette sur le dessus ○
- Plateau inférieur ○

Élément adjoint

- Panneau de commande ●
- Élément assistant mobile ●
- 3 Seringue fonctionnelle ●
- Grand tuyau d'aspiration ●
- Petit tuyau d'aspiration ●
- Lumière de polymérisation LED ○

Unité d'eau

- Cuspidor mobile en céramique ●
- Système ABS Aqua Bottle ●
- Chauffage pour remplisseur de gobelets ●
- Connexion pour l'aspiration externe (avec vanne de sélection de lieu) ○
- Système d'aspiration Venturi eau/air ou air/air ●

Lumière de fonctionnement

- Ritter CoolLite LED ●
- Ritter SunLite LED ○
- Ritter Standard LED ○

Tabourets

- MobiloFlex 60 ●
- MobiloFlex 60 avec anneau de pied ○

Multimédia

- Caméra intra-orale ○
- Moniteur ○




Ultimate Comfort Smart

P N E U M A T I Q U E S Y N C H R O N I S É



U C S M A R T P S Y N C H R O N I Z E D

Q U A L I T É I N T E L L I G E N T E

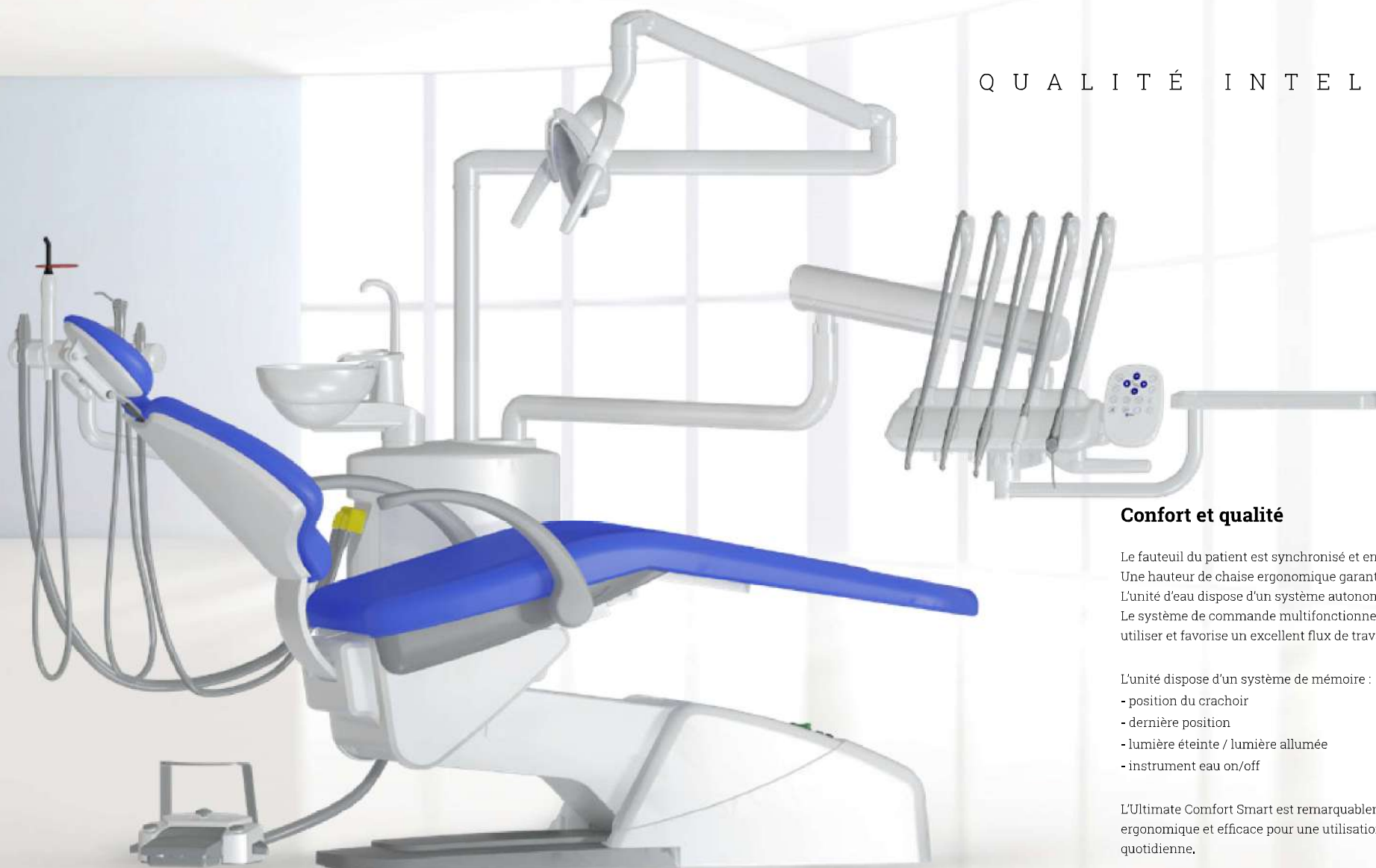

Confort et qualité

Le fauteuil du patient est synchronisé et entraîné électriquement. Une hauteur de chaise ergonomique garantit un accès facile. L'unité d'eau dispose d'un système autonome d'eau propre. Le système de commande multifonctionnel à pédale est facile à utiliser et favorise un excellent flux de travail.

L'unité dispose d'un système de mémoire :

- position du crachoir
- dernière position
- lumière éteinte / lumière allumée
- instrument eau on/off

L'Ultimate Comfort Smart est remarquablement ergonomique et efficace pour une utilisation quotidienne.

C O N F O R T I N T E L L I G E N T

Chaise de patient

- Mouvement électrique de la chaise pour des déplacements rapides et silencieux
- Design ergonomique pour une assise confortable même pendant les longs traitements
- Large espace pour les jambes du dentiste
- Revêtement en cuir de haute qualité
- 4 positions de fauteuil programmables, plus la dernière position et la position de sortie
- Fonction de retour automatique :
Si l'interrupteur de sécurité est activé, le fauteuil se déplace automatiquement vers le haut sur quelques cm.
- Interrupteurs de sécurité
- Mouvement de Trendelenburg :
Mouvement de l'assise et du dossier synchronisé
- Accoudoir fixe à gauche et mobile à droite
- Appui-tête à double articulation



Éléments du dentiste

Manipulation facile et traitements efficaces : Selon les préférences personnelles, deux versions différentes sont disponibles, qui permettent un ajustement facile des instruments. Les commandes des instruments sont à commande pneumatique.



„S“ Version avec des tuyaux pivotants

- Tablette disponible
- Mécanisme de freinage pneumatique du bras
- Jusqu'à 5 instruments
- 4 positions programmables du fauteuil du patient, plus la dernière position et la position de sortie
- Plateau inférieur en option

Panneau de contrôle

- Écrans tactiles avec visionneur de rayons X
- 4 positions programmables du fauteuil du patient, plus la dernière position et la position de sortie
- Tampon en silicone amovible pour un nettoyage et une désinfection faciles (Version S)



„H“ Version avec tuyaux suspendus

- Tablette disponible
- Mécanisme de freinage pneumatique du bras
- Jusqu'à 5 instruments
- 4 positions programmables du fauteuil du patient, plus la dernière position et la position de sortie
- Plateau en option sur le plateau supérieur ou inférieur




ÉCLAIRAGE INTELLIGENT



Lumière de fonctionnement

L'éclairage là où il est nécessaire : La lampe d'opération LED de Ritter

- Intensité de la lumière 8.000 - 30.000 Lux
- Interrupteur à capteur - côté arrière - par mouvement de la main
- Température de couleur 5.000 Kelvin
- Couleur de température réglable
- Intensité lumineuse réglable
- Faible émission de chaleur
- Éclairage précis du champ de travail

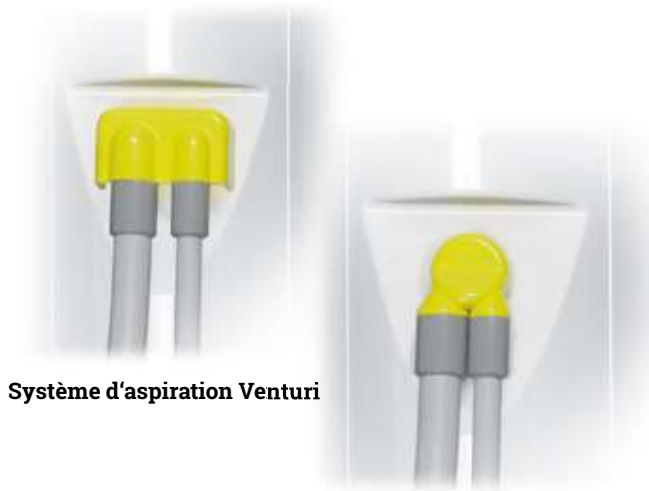

Système d'aspiration Venturi

Aspiration centrale externe

Aspiration externe avec vanne de sélection de lieu.

Une machine d'aspiration est nécessaire pour le fonctionnement.




Caméra intra-orale avec moniteur

Élément assistant

Flexibilité pour une efficacité maximale

- Panneau tactile intégré
- Jusqu'à 4 instruments
- Grand et petit tuyau d'aspiration
- Seringue d'assistance
- Lumière de polymérisation

 Ritter
Made in Germany

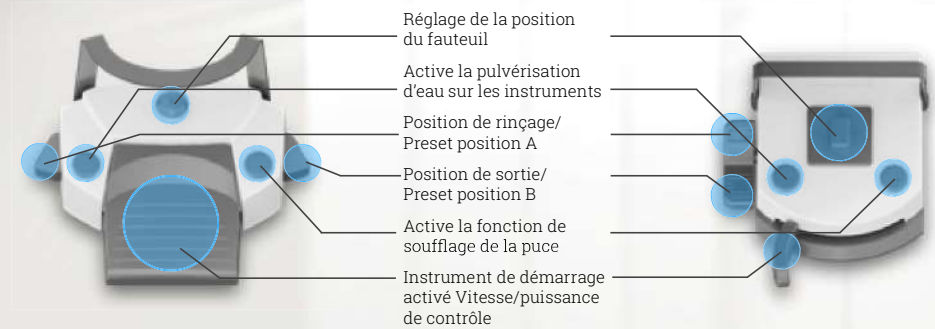

Commande au pied

Design moderne pour le mouvement des chaises et des instruments :

- Grand levier de pied pour un repositionnement facile
- Contrôle manuel des mouvements du fauteuil
- Montée/descente du dossier et du fauteuil
- Contrôle programmé des mouvements du fauteuil :
- Position du crachat/du dernier traitement
- Positions du fauteuil librement programmables
- Position d'entrée / de sortie



Type de levier en option

Contrôle des instruments :

- Commande de vitesse/puissance pour l'instrument activé
- Mode marche/arrêt de l'eau pour l'instrument

Boutons :

- Vaporiser de l'eau sur l'instrument
- Fonction de souffleur de copeaux




Tabouret

- Dossier à position fixe ou à mouvement dynamique
- Sièges ergonomiques et confortables
- Dossier symétrique
- Cylindre de levage à gaz
- Pieds chromés
- Cinq roulettes doubles pour la stabilité
- Le rembourrage assorti aux couleurs est disponible en plusieurs couleurs.
- Disponible avec ou sans anneau de pied



Couleurs de la tapisserie

Pour tabouret et fauteuil patient. Demandez à votre revendeur dentaire le dossier de motifs Ultimate Comfort Smart.

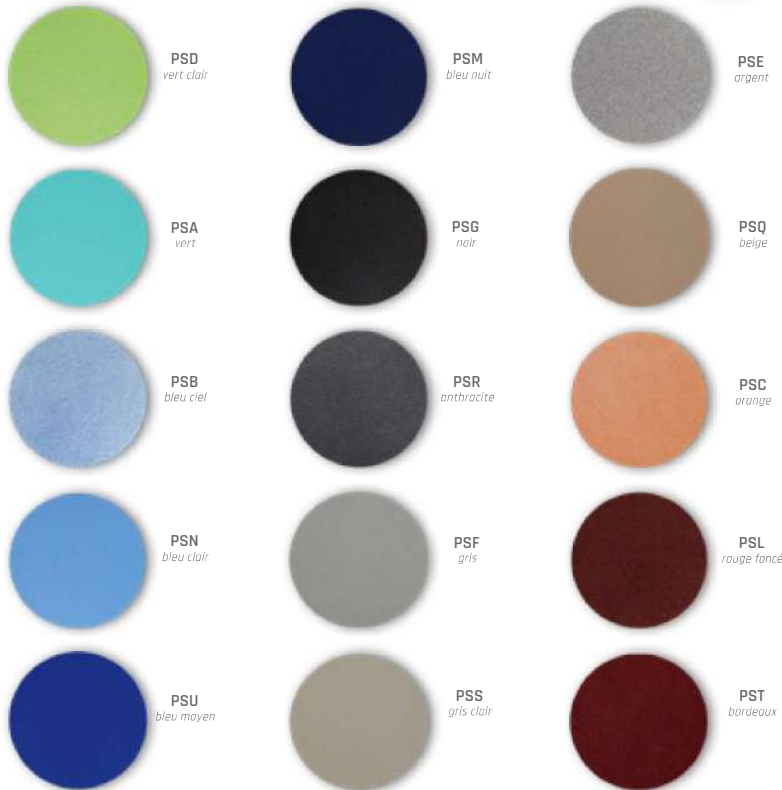

Les échantillons présentés peuvent présenter des différences de structure et de couleur en raison du processus d'impression.

Caractéristiques et options Ultimate Comfort Smart P Synchronisé

● STANDARD ○ OPTION

Chaise de patient

- Mouvement de Trendelenburg ●
- Stockage des positions ●
- Interrupteur de sécurité ●
- Appui-tête doublement articulé mécaniquement ●
- Accoudoir fixe à gauche et mobile à droite ●
- Rembourrage sans couture ●
- Contrôle multifonctionnel ●

Élément de dentiste

- 3 Seringue fonctionnelle ●
- 3 sorties pour turbine ou moteur pneumatique sans lumière ●
- Sorties en fibre optique ○
- Moteur micro sans balai avec LED ○
- LED S ou E du curvimètre ○
- Lumière de polymérisation LED ○
- Petite visionneuse de films radiographiques ●
- Support pour 2 plateaux standard ●
- Tablette sur le dessus ○
- Plateau inférieur ○

Élément assistant

- Panneau de commande ●
- Élément assistant mobile ●
- 3 Seringue fonctionnelle ●
- Grand tuyau d'aspiration ●
- Petit tuyau d'aspiration ●
- Lumière de polymérisation LED ○

Unité d'eau

- Cuspidor mobile en céramique ●
- Système ABS Aqua Bottle ●
- Chauffage pour remplisseur de gobelets ●
- Connexion pour l'aspiration externe ○
- (avec vanne de sélection de lieu)
- Système d'aspiration Venturi eau/air ou air/air ●

Lumière de fonctionnement

- Ritter Standard LED ●
- Ritter CoolLite LED ○
- Ritter SunLite LED ○

Tabourets

- MobiloFlex 60 ●
- MobiloFlex 60 avec anneau de pied ○

Multimédia

- Caméra intra-orale ○
- Moniteur ○