


Ultimate Comfort



ULTIMATE COMFORT

C O M F O R T

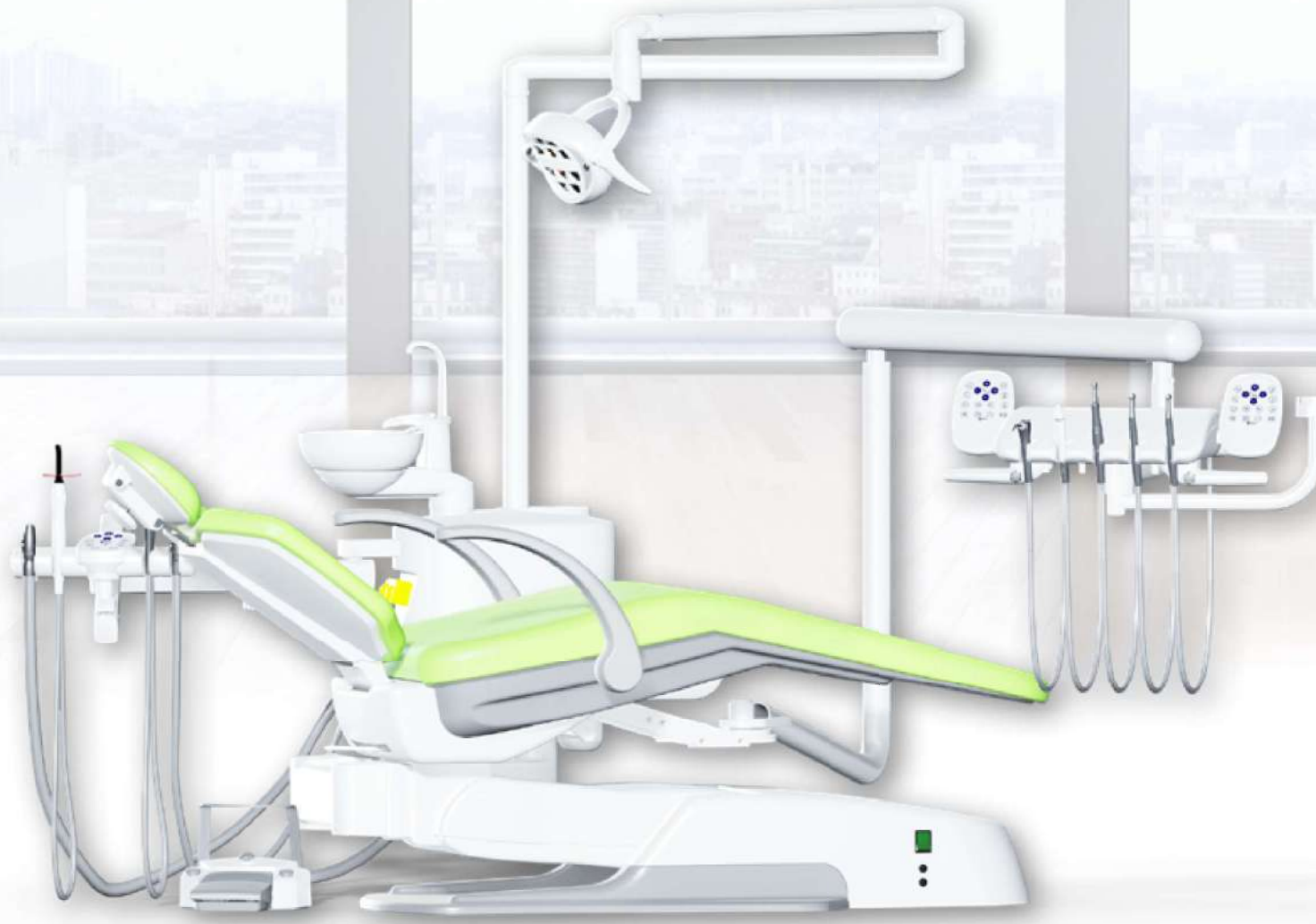

Confort et qualité

L'unité orientable à gauche et à droite peut passer de la main droite à la main gauche très facilement.

Le fauteuil du patient est synchronisé - disponible en version électrique - et a un mouvement de 30° pour un accès facile.

L'unité dispose d'un système de mémoire
- position du crachoir
- dernière position
- lumière éteinte / lumière allumée



L'unité d'eau est dotée d'un système autonome d'eau propre. Le système de commande multifonctionnel à pédale est facile à utiliser et favorise un excellent flux de travail.

L'Ultimate Comfort est remarquablement ergonomique et efficace pour une utilisation quotidienne.

V A R I A B I L I T É

Modifiable à la volée :

Points de pivotement et centres de rotation

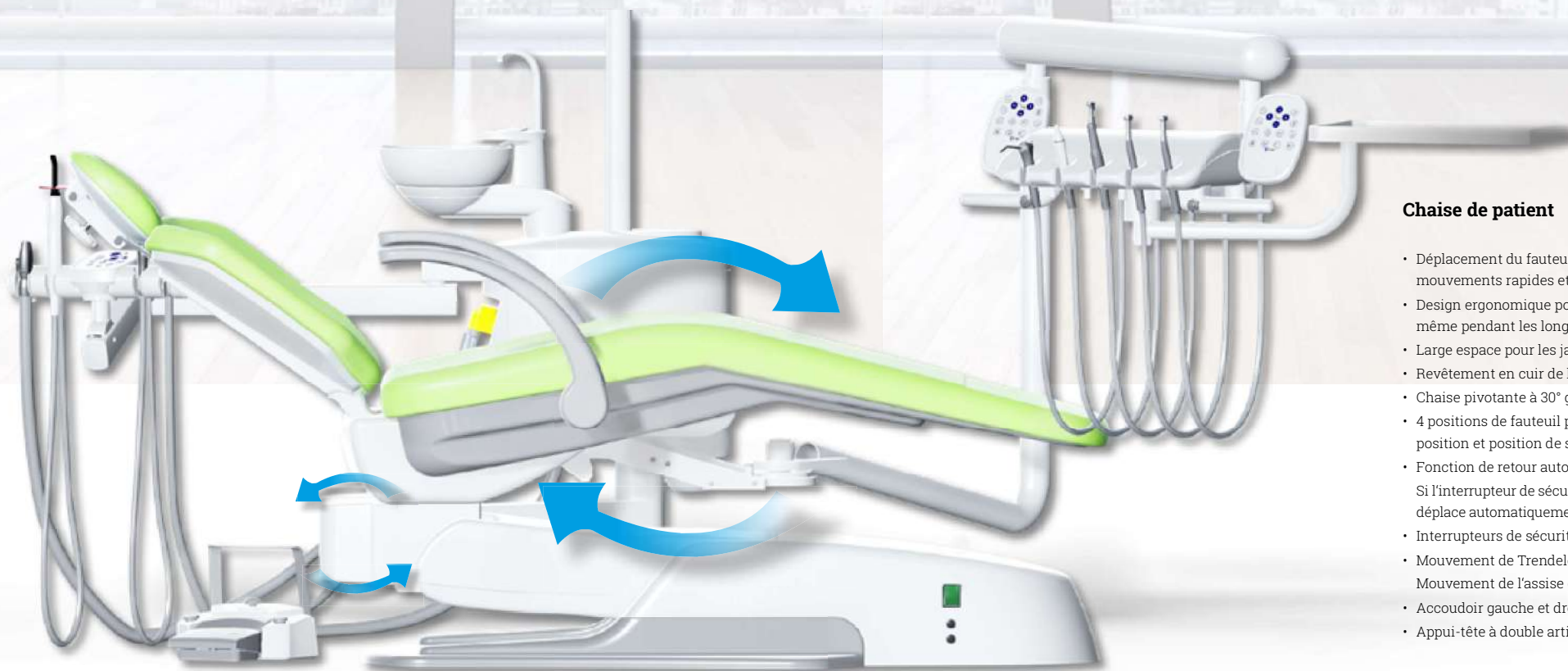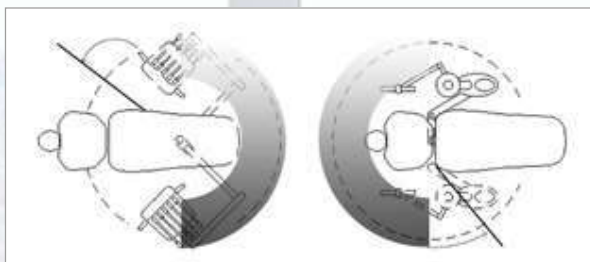

Chaise de patient

- Déplacement du fauteuil électrique pour des mouvements rapides et silencieux
- Design ergonomique pour une assise confortable même pendant les longs traitements
- Large espace pour les jambes du dentiste
- Revêtement en cuir de haute qualité
- Chaise pivotante à 30° gauche/droite
- 4 positions de fauteuil programmables, plus dernière position et position de sortie
- Fonction de retour automatique :
Si l'interrupteur de sécurité est activé, le fauteuil se déplace automatiquement de quelques cm vers le haut
- Interrupteurs de sécurité
- Mouvement de Trendelenburg :
Mouvement de l'assise et du dossier synchronisé
- Accoudoir gauche et droit mobile
- Appui-tête à double articulation

Éléments du dentiste

Manipulation facile et traitements efficaces : Selon les préférences personnelles, deux versions différentes sont disponibles, qui permettent un ajustement facile des instruments. Les commandes des instruments sont électriques.

S-Version, version oscillante

- Tablette disponible
- Mécanisme de freinage pneumatique du bras
- Jusqu'à 5 instruments
- 2 écrans tactiles avec visionneuse à rayons X
- 4 positions programmables du fauteuil du patient, plus la dernière position et la position de sortie
- Plateau inférieur en option



Equipé de 2 écrans tactiles !



H-Version, version suspendue

- Tablette disponible
- Mécanisme de freinage pneumatique du bras
- Jusqu'à 5 instruments
- 2 écrans tactiles avec visionneuse à rayons X
- 4 positions programmables du fauteuil du patient positions, plus la dernière position et position de sortie
- Capteurs optiques dans les porte-instruments
- Plateau inférieur ou plateau supérieur en option

Panneau de contrôle

- Écrans tactiles avec visionneur de rayons X
- 4 positions programmables du fauteuil du patient, plus la dernière position et la position de sortie
- Tampon en silicone amovible pour un nettoyage et une désinfection faciles (S-Version)



Lumière de fonctionnement



Ritter SunLite LED



- Intensité de la lumière 8.000 - 50.000 Lux
- Température de couleur 4.200 - 6.000 Kelvin
- Couleur à température réglable
- Intensité lumineuse réglable
- Faible émission de chaleur
- Cycle de vie long
- Éclairage précis du champ de travail

Q U A L I T É



Bras assistant doublement articulé, réglable en hauteur



Caméra intra-orale avec moniteur

Élément assistant

- Panneau tactile intégré
- Jusqu'à 4 instruments
- Grand et petit tuyau d'aspiration
- Seringue d'assistance
- Mouvement des bras doublement articulé et réglable



Commande au pied

Design moderne pour le mouvement des chaises et des instruments :

- Grand levier de pied pour un repositionnement facile
- Contrôle manuel des mouvements du fauteuil
- Montée/descente du dossier et du fauteuil

Contrôle programmé des mouvements du fauteuil :

- Position du crachat/du dernier traitement
- Positions du fauteuil librement programmables
- Position d'entrée / de sortie

Contrôle des instruments :

- Contrôle de la vitesse et de la puissance de l'instrument actif
- Mode individuel de marche/arrêt de l'eau pour chaque ligne d'instruments

Boutons :

- Vaporiser de l'eau sur l'instrument
- Fonction de souffleur de copeaux

Versions :

- Type de pédale standard
- Type de levier en option



Type de levier en option



Type de pédale standard




Tabouret

- Dossier à position fixe ou à mouvement dynamique
- Sièges ergonomiques et confortables
- Dossier symétrique
- Cylindre de levage à gaz
- Pieds chromés
- Cinq roulettes doubles pour la stabilité
- Rembourrage assorti disponible en plusieurs couleurs
- Disponible avec ou sans anneau de pied

Utilisation optimale de la pièce

L'Ultimate Comfort est également très bien adapté aux petites salles de clinique, dans lesquelles l'espace disponible est limité.


E F F I C A C I T É

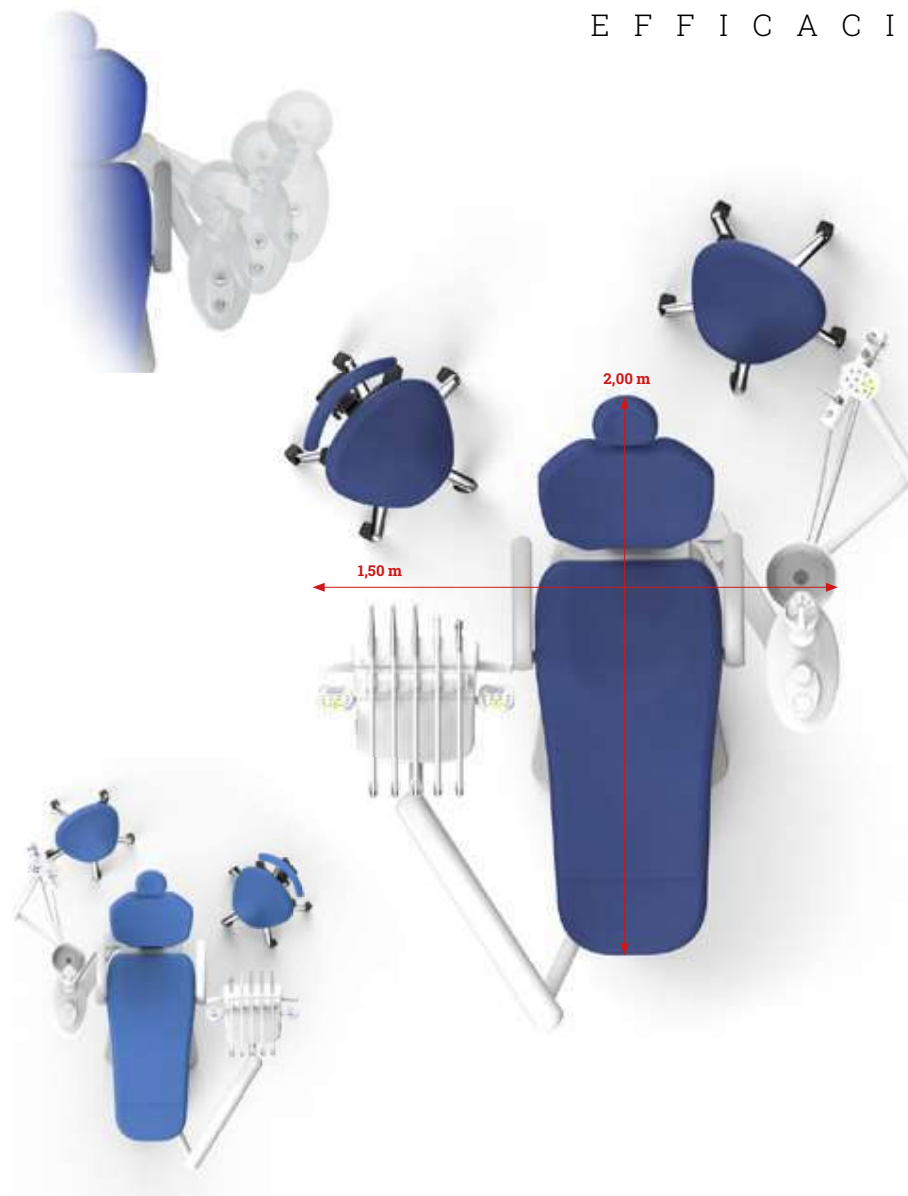

Couleurs de la tapisserie d'ameublement

Plusieurs couleurs fraîches et modernes sont disponibles.

D I V E R S I T É

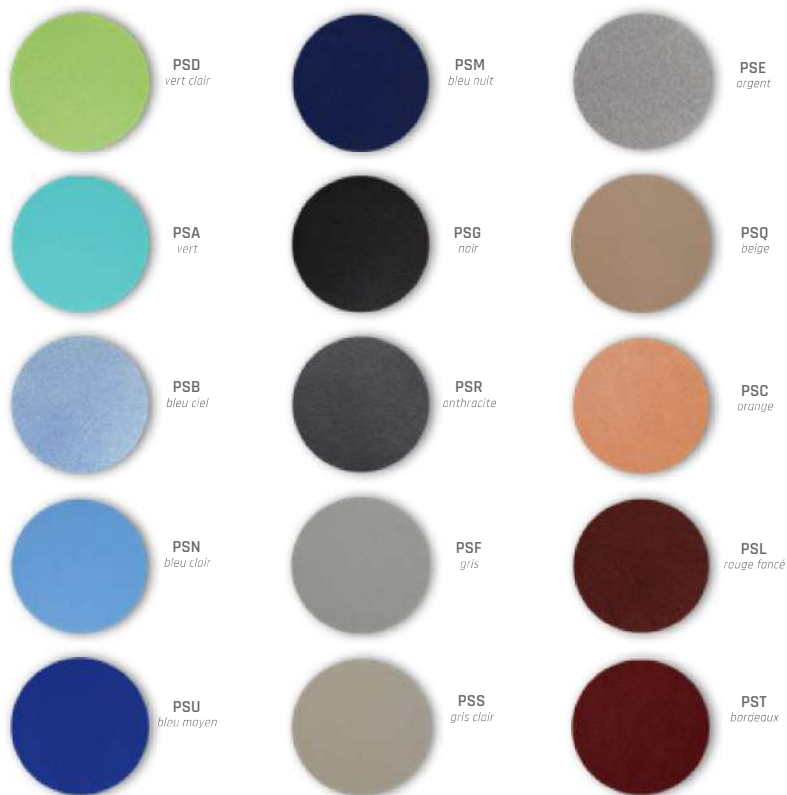

Les échantillons présentés peuvent présenter des différences de structure et de couleur en raison du processus d'impression.

Features and options Ultimate Comfort

● Standard
○ Option

Chaise de patient

- Mouvement de Trendelenburg ●
- Stockage des positions ●
- Interrupteur de sécurité ●
- Appui-tête doublement articulé mécaniquement ●
- Accoudoir gauche et droit mobile ●
- Rembourrage sans couture ●
- Contrôle multifonctionnel ●
- Mouvement de 30° du fauteuil ●

Élément de dentiste

- 3 Seringue fonctionnelle ●
- 3 sorties pour turbine ou moteur pneumatique sans lumière ●
- Sorties en fibre optique ○
- Moteur micro sans balai avec LED ○
- LED S ou E du curvimètre ○
- Lumière de polymérisation LED ○
- Petite visionneuse de films radiographiques ●
- Support pour 2 plateaux standard ●
- Tablette sur le dessus ○
- Table inférieure ○

Élément assistant

- Panneau de commande ●
- Élément assistant réglable ●
- 3 Seringue fonctionnelle ●
- Grand tuyau d'aspiration ●
- Petit tuyau d'aspiration ●
- Lumière de polymérisation LED ○

Unité d'eau

- Cuspidor mobile en céramique ●
- Système ABS Aqua Bottle ●
- Chauffage pour remplisseur de gobelets ●
- Connexion pour l'aspiration externe (avec vanne de sélection de lieu) ○
- Système interne Venturi eau/air ou air/air ●

Lumière de fonctionnement

- Ritter SunLite LED ●
- Ritter CoolLite LED ○

Tabourets

- Mobilo Flex 60 ●
- Mobilo Flex 60 avec anneau de pied ○

Multimédia

- Caméra intra-orale ○
- Moniteur ○

